

Actim[®] Fecal Blood

SIISTI JA YKSIN- KERTAINEN TAPA HAVAITA ULOSTEEN PIILEVÄ VERI

Actim Fecal Blood on korkealaatuinen ja käyttäjäystävällinen pikatesti, joka havaitsee piilevän veren potilaan ulosteessa. Testin edistyksellinen, ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa todella käytännöllisen ja hygieenisen ratkaisun, joka ei vaadi ruokavaliorajoitteita.

Testimme avulla tunnistat 10 minuutissa potilaat, joilla saattaa olla vakava ruoansulatuskanavan häiriö sekä heidät, jotka tarvitsevat pikaista sairaanhoitoa. Koska näytteenotto on niin helppoa, potilaiden ei tarvitse pelätä epämiellyttäviä tutkimuksia ja kynnyks testaukseen pysyy matalana.

Miljoonat Actim Fecal Blood -testaukset ovat osoitus siitä, että pikatestin laatua ja helppokäyttöisyyttä arvostetaan laajalti.

 Medix
Biochemica

 www.medixbiochemica.com



ACTIM FECAL BLOOD - HELPPO RATKAISU SEKÄ POTILAALLE ETTÄ AMMATTILAISELLE

Testimme on ihanteellinen kaikin tavoin: se on yksinkertainen, nopea, tarkka ja turvallinen käyttää.

Näytteenotto on erittäin vaivatonta ja näytteen voi kerätä milloin vain, missä vain, jopa kotona. Näytteenottoputki on niin pieni, että sen voi lähettää vaikka postitse takaisin laboratorioon. Näyte säilyy huoneenlämmössä jopa kokonaisen viikon ennen testausta.

Yksivaiheinen testi on todella nopea, vieden vain 15 sekuntia aktiivista aikaa laboratorioissa. Se on aina käytövalmis eikä siis vaadi minkäänlaisia laitteita. Testi säilyy huoneenlämmössä, ja testipakkaus sisältää kaiken testaukseen tarvittavan. Lisäksi testi on hyvin käytännöllinen, kun tehdään useampia testejä yhtäaikaaisesti tai joukkoseulontoja.

UUOAMATON NÄYTTEENOTTOSYSTEMI

Innovatiivinen ratkaisumme mahdollistaa poikkeuksellisen hygieenisen testauksen ja näytteenkäsittelyn.

Näytteenottosysteemi on suljettu eikä putkea tarvitse avata testausta varten. Tämä tekee siitä turvallisen ja huolettoman.

Testi tarvitsee hyvin pienen näyttemäärän, jonka näytteenottosysteemi säätää juuri optimaaliseksi – näin taataan, että tulokset ovat aina tarkkoja.


MITEN TESTI TOIMII

Actim Fecal Blood -testi havaitsee ruoansulatuskanavan verenvuodon jo ennen kuin se on silmännähtävää. Testi on korkealaatuinen, 94 prosentin spesifinen ja optimaalisen herkkä. Sen avulla vältetään tarpeettomat, epämukavat ja kalliit tutkimukset.

Testi on immunologinen ja perustuu vain ihmisen hemoglobiiniin tunnistaviin monoklonaalisiin vasta-aineisiin; se ei aiheuta ristireaktioita muiden hemoglobiinien kanssa. Toisin sanoen, testi ei vaadi ruokarajoituksia: punaista lihaa sekä peroksidaasiaktiivisia kasviksia ja hedelmiä voidaan huoletta syödä juuri ennen testausta.

Verinen uloste – aikainen diagnosointi on elintärkeää

Uloste ei normaalisti sisällä mitattavia määriä verta ja piilevä ulosteen veri onkin merkki vuodosta ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtua esimerkiksi peräpukamista, mutta voi olla pahimmillaan merkki myös paksusuolen syövästä. Nopea piilevän veren havaitseminen on välttämätöntä ja voi pelastaa henkiä.

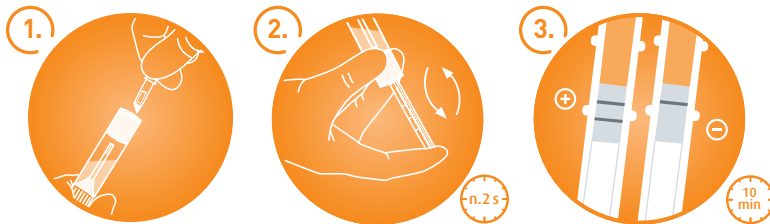

1. Puhkaise korkki
2. Aktivoi testi
3. Lue tulos



OTA YHTEYTTÄ

Medix Biochemica
Klovinpellontie 3, 02180 Espoo
Tilaukset: (09) 547 68 200,
tilaukset@medixbiochemica.com

Tilautustiedot	
Actim Fecal Blood 20 testiä	30331ETAC
Actim Fecal Blood 10 testitikkua	30361ETAC
Actim Fecal Blood 20 puskuriputkea	30372ETAC
Actim Fecal Blood kontrollit	30300ETAC